




KULLANMA TALİMATI

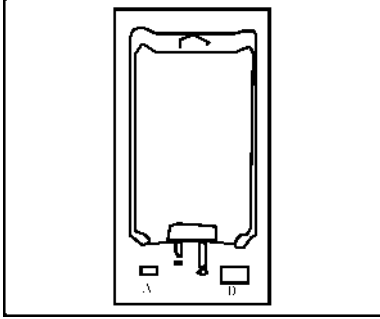


1. Koruyucu kılıf açılmadan önce uygunluk indikatörü (oxalert) A gözle kontrol edilmelidir. İndikatörün rengi siyah ise kılıf hasar görmüş demektir ve ürün kullanılmamalıdır.

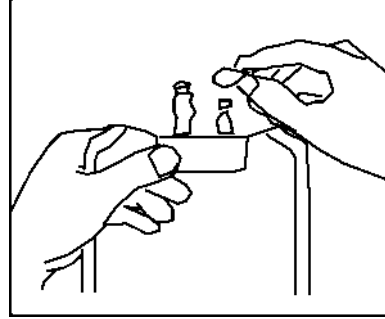


2. Koruyucu kılıfı çentikli yerinden yırtarak ve aşağı doğru çekerek dış ambalajı atınız. Oxalert Şase A ve oksijen absorbe edici madde B'de atılmalıdır.

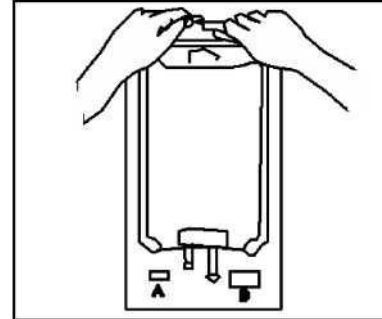


3. Eğer ek maddeler verilecekse enjeksiyon yolu uygun bir dezenfektan ile silinmelidir. 4. Poşet sert bir zemine yayılmalı, enjeksiyon yolu resimdeki gibi desteklene-rek

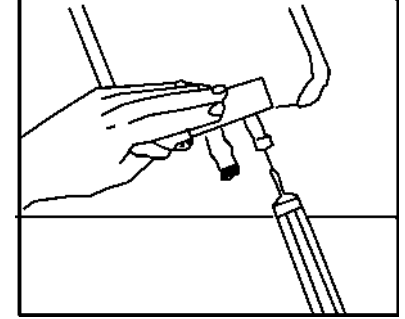


ek maddeler poşete karıştırılmalıdır. Herbir uygulamadan sonra homojen karışım için poşet birkaç kez ters düz edilmelidir.

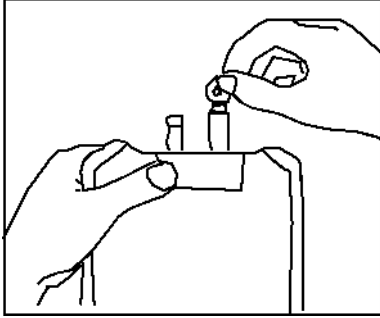


5. İnfüzyon yolunun ucundaki kapağı halkasından tutarak çekip çıkartınız.

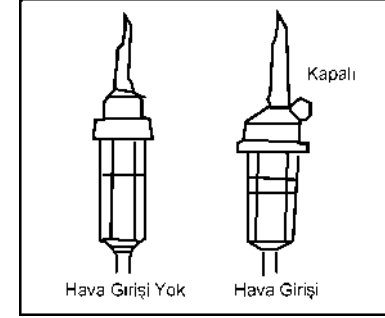

6. İnfüzyon için hava girişi olmayan ya da hava girişi olup da girişi kapatılmış bir set kullanılabilir. İnfüzyon setinin uygulama klavuzunu takip ediniz. 7. İnfüzyon yolunu şekilde görüldüğü gibi destekleyip yukarı kaldırınız. Setin iğnesini yol boyunca diyaframı delene kadar içine itiniz. İğne tamamen ve sıkıca yerine

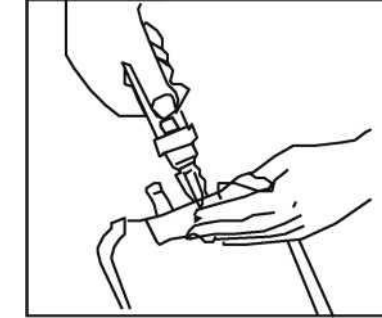

oturulmuş durumda bulunmalıdır.

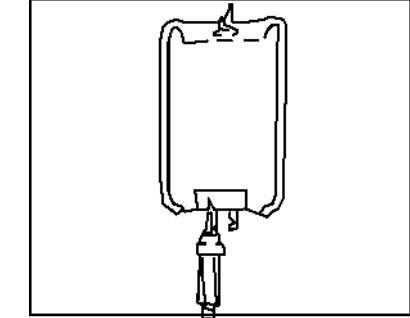

8. Poşeti ters çevirip askı yerinden asınız.